

madglove

Amsterdam



Feilsøking

MADGLOVE ASSIST

OVEREKSTENSJON

FINGRENE (DIP- OG PIP-LEDDENE)



For å bidra til å forhindre overstrekk av fingrene anbefaler vi å bruke en liten skinne på både DIP- og PIP-leddene. (Bilder av Oval-8-skinne). Skinnene kan brukes under fingerhylsene på Madglove Assist. De kan være laget av metall eller plast, avhengig av hva som føles mest komfortabelt for deg og hva som passer ditt budsjett. Skinnene fungerer som en mild påminnelse om å holde fingrene innenfor et trygt bevegelsesområde og bidrar til å forhindre at leddene overstrekes.

KNOKENE (MCP-LEDDENE)



For MCP-leddene anbefaler vi at du ber teknikeren om å lage et ekstra, uelastisk bånd på hansken som går langs håndflaten ved MCP-området. Dette ekstra båndet kan bidra til å forhindre at det oppstår et mellomrom mellom hånden og hansken, noe som er viktig både for komfort og for at støtten skal fungere som tiltenkt. Vi arbeider også aktivt med å utvikle et tilbehør som skal løse dette problemet. Vi har imidlertid foreløpig ingen konkret tidsplan på når dette vil være tilgjengelig. Du kan også være trygg på at vi jobber med saken.



En knokebøyer kan også være en enkel løsning som teknikeren kan lage. En knokebøyer er et lite hjelpemiddel som forsiktig bøyer fingrene i de innerste fingerleddene (MCP-leddene) for å hindre at de bøyes bakover. Den bruker myk elastikk eller fjærspenning for å holde hånden i en naturlig og komfortabel stilling, samtidig som du kan bevege fingrene normalt.

I tillegg til tilbehøret er det viktig at hansken sitter riktig. Følg tilpasningsinstruksjonene nøye for å sikre at hansken holder seg i riktig posisjon og ikke glir opp på hånden. Feil tilpasning kan i noen tilfeller bidra til overstrekk. Det er også viktig å unngå å stramme fingrene for mye ved hjelp av justeringshjulet. Samarbeid med klinikeren din for å finne et spenningsnivå som gir riktig støtte uten å medføre risiko for overstrekk av MCP-leddene.

KOMFORT


Trykk og hudpleie

Det er ganske vanlig å oppleve enkelte trykkpunkter når du bruker hansken. Det er viktig å følge med på dette for å sikre god komfort og forebygge hudproblemer. Når du begynner å bruke hansken, bør du unngå å bruke den over lengre perioder med en gang. Start med cirka 10-15 minutter, og øk gradvis brukstiden etter hvert som huden venner seg til hansken. Tenk på hansken som et par nye sko- det er normalt at det tar litt tid å gå dem inn før de blir komfortable.

Mens du gradvis øker brukstiden, bør du regelmessig kontrollere huden under hansken for tegn på trykkpunkter eller rødhet. Hvis du opplever områder som føles stramme eller ubehagelige, kan du justere stroppene forsiktig for å forbedre passformen. Du kan for eksempel løsne eller stramme håndleddsstroppene etter behov for å oppnå en bedre tilpasning. Sørg også for at alle deler sitter riktig, og at ingenting forskyver seg eller danner ubehagelige kanter eller folder.

Siden hansken fungerer som et klesplagg, kan hånden noen ganger blir varm. Hvis du er følsom for varme, bør du være ekstra oppmerksom og ta av hansken slik at hånden får avkjølt seg ned litt før du tar den på igjen.

Hvis du fortsatt opplever ubehag etter at du har brukt inn hansken, og føler at du trenger mer polstring, kan du be teknikeren din om å legge til et ekstra, mykt lag.

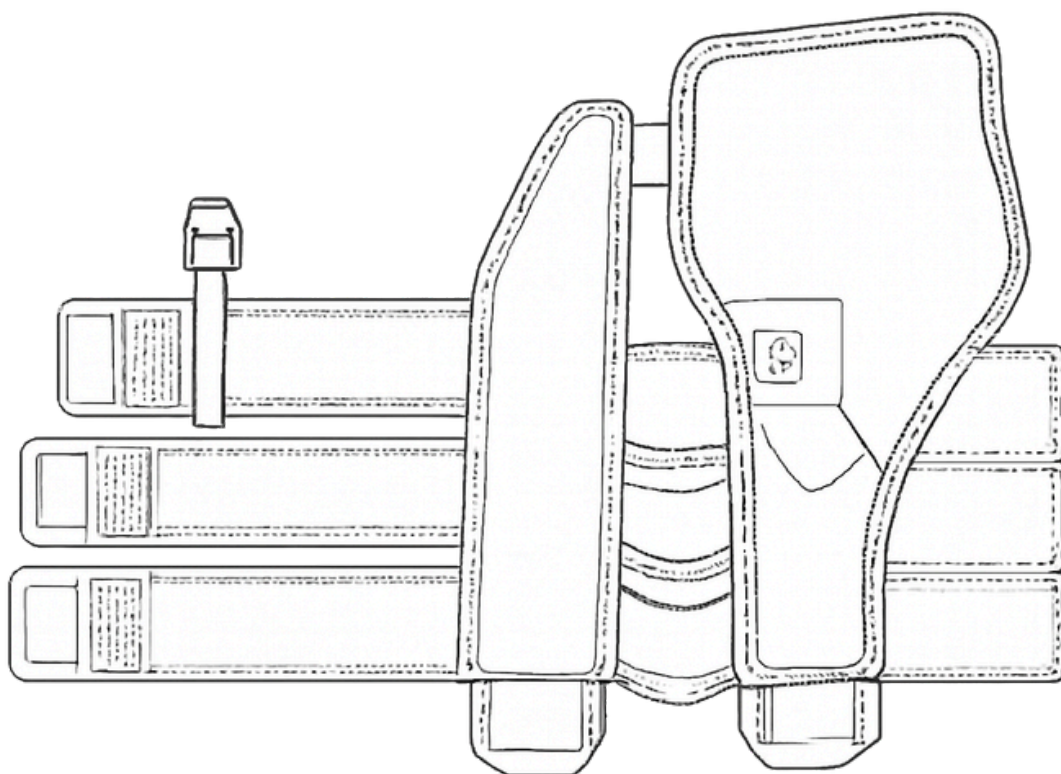

TILPASNING



Justering av søtten til knokkene

Siden alles behov er forskjellige, har vi utformet hansken slik at den kan justeres på flere måter. Håndleddsstøtten har for eksempel en ekstra lomme for en skinne som kan brukes for å gi ytterligere stabilitet. Be teknikeren din om hjelp derfor du ønsker å benytte denne. Skinnen plasseres i den tilhørende lommen på hansken.

Det finnes også justeringsglidere på oversiden av hansken, over MCP-leddene på fingrene. Sørg for at disse er justert slik at de passer hånden din godt og er riktig justert i forhold til fingrene. Riktig plassering er viktig. Hvis fingrene ikke peker rett frem, kan du prøve å justere gliderne i motsatt retning for å bidra til å rette dem ut.

Hvis du opplever at gliderne ikke holder seg på plass, kan du be teknikeren sin, eller noen med gode syferdigheter, om å feste dem slik at de ikke lenger kan forskyve seg. Hvis en glider går i stykker, kan hansken fortsatt brukes. Hvis du opplever at glideren er nødvendig for at hansken skal fungere godt, kan du kontakte oss, så hjelper vi deg med å finne en løsning.

Plassering av håndleddsstøtten

Håndleddsstøtten skal være plassert rett på innsiden av underarmen og følge armen rett nedover. En liten vinekl mot venstre eller høyre er helt greit. Hvis håndleddsstøtten derimot er tydelig forskjøvet fra midten, slik at den er ubehagelig og ikke fungerer som den skal, kan det være et tegn på at størrelsen på støtten ikke er riktig.


Noen opplever at det blir et mellomrom mellom hånden og støtten på lillefingersiden av hansken, ved høyde med MCP-leddene. Dette kan tyde på at støtten er for stor. Det er imidlertid ikke nødvendigvis et problem så lenge hansken ellers sitter komfortabelt og fungerer godt. Hvis du opplever problemer med komfort eller funksjon, blr du kontrollere størrelsesguiden på nytt og undersøke om en mindre størrelse vil passe bedre.

Kontroller størrelsesguiden en gang til. Før du bestiller en ny størrelse, må du forsikre deg om at hansken er riktig plassert på hånden og armen, og at håndleddsstøtten ikke er plassert for høyt eller for lavt.

Tommelstroppen er for lang

Hvis stroppen som er festet til tommelen føles for lang eller er til sjeanse under bruk, kan den kortes litt ned. La det være igjen **minst 3 cm** ekstra lengde for å sikre at det fortsatt er tilstrekkelig rom for bevegelse og eventuelle fremtidige justeringer.

Hvis du velger å klippe stroppen, må enden av snoren varmes opp etterpå for å hindre at den frynser seg. Vi anbefaler at du ber teknikeren din om å gjøre dette for deg. **Ikke forsøk å gjøre dette hjemme.**

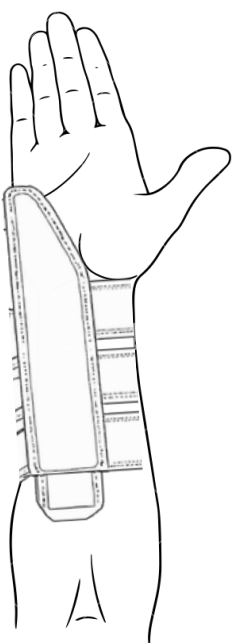

Brudd eller feil på en del- glidere

Gliderne og midtpunktet er laget av et svært hardt materiale, noe som også betyr at de kan knekke dersom delene utsettes for stor belastning. Hvis dette skjer, og hansken ikke kan brukes etter at en del har gått i stykker, ber vi deg kontakte oss.

Opplever du tap av spenning, eller at spenningen ikke påføres riktig?

Juster spenningen med hjulet til midtpunktet er på linje med den hvite sikksakkstripen på baksiden av hansken.

Ta deretter på hansken. Fjern pluggen først, og tilbakestill deretter spenningen på fingrene én etter én.

Hvis du under bruk opplever uønsket økt eller redusert spenning mellom fingrene, kan fingerlengdene justeres på nytt.

Andre generelle kvalitetsproblemer

Hansken er beregnet for en brukstid på **maksimalt 2 år**, ettersom den brukes mange timer og vil være utsatt for normal slitasje over tid. Ved normal bruk og rengjøring i henhold til instruksjonene skal hansken vare i minst 2 år.

Hvis du opplever unormal slitasje i løpet av denne perioden, ber vi deg kontakte oss.

Ved kvalitetsproblemer

Hvis du opplever kvalitetsproblemer som påvirker produktets funksjon, eller hvis deler går i stykker, ber vi deg kontakte oss via kontaktskjemaet på nettsiden. Gjennom kontaktskjemaet får vi all informasjonen vi trenger for å kunne hjelpe deg på best mulig måte.

Madglove er utviklet for å være fleksibel og enkel å justere. Med litt kreativitet og kunnskap kan teknikere og terapeuter finjustere hanskens tilpasning og støtte, slik at den føles komfortabel og fungerer optimalt for hver enkelt bruker.