

Norsk

Madglove Assist Brukermanual

1. Introduksjon

Velkommen til brukermanualen for Madglove Assist! Denne manualen vil veilede deg i hvordan du bruker Madglove Assist på en trygg og effektiv måte. **Madglove Assist er utviklet for å hjelpe deg med håndfunksjon (ekstensjon) og fremme selvstendighet i daglige aktiviteter. Den gir justerbar støtte til ulike behov, slik at du kan delta mer aktivt i hverdagen din.**

Viktig: Før du tar i bruk Madglove Assist, må du lese hele denne manualen nøye. Hver seksjon inneholder tydelige instruksjoner og bilder som hjelper deg å bruke produktet trygt og korrekt. Ved risiko for overekstensjon i fingrene anbefaler vi å kombinere Madglove Assist med produkter som kan redusere denne risikoen. Behovet for slike tilleggshjelpemidler bør vurderes av helsepersonell.

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, kontakt Madglove (se seksjon 8 for kontaktinformasjon) eller rådfør deg med helsepersonell.

2. Indikasjoner, kontraindikasjoner, forholdsregler og bivirkninger

Denne delen forklarer når du kan bruke Madglove Assist, når du IKKE bør bruke den, hva du må være oppmerksom på, og mulige problemer.

2.1. Indikasjoner (når du kan bruke den)

Madglove Assist er beregnet for voksne (18 år og eldre) som har nedsatt funksjon i overekstremitet og hånd som påvirker dagliglivet. Disse utfordringene kan inkludere:

- Spastisitet (nivå 1-3 på Modified Ashworth Scale)
- Muskelsvakhet
- Begrenset bevegelsesutslag

Madglove Assist hjelper ved å:

- Gi støtte til håndleddet
- Hjelp med ekstensjon i finger og tommel
- Korrigere hånd- og fingerstilling

2.2. Kontraindikasjoner (når du IKKE bør bruke den)

Ikke bruk Madglove Assist dersom noe av følgende gjelder for deg:

Alvorlige hudtilstander: Åpne sår, kraftige utslett, ubehandlete infeksjoner eller aktive hudlesjoner på områdene der hansken er i kontakt med huden.

Alvorlig perifer nevropati: Betydelig redusert følelse i hendene eller nedsatt evne til å registrere smerte, trykk eller temperaturrendringer.

Akkutt leddbetennelse: Aktive oppbluss av artritt eller annen akutt leddbetennelse.

Ukontrollerte medisinske tilstander: Ukontrollerte medisinske tilstander som kan påvirkes negativt av trykk eller spesifikke håndstillinger, inkludert dyp venetrombose, nedsatt sirkulasjon eller akutte inflammatoriske tilstander.

Allergier: Kjente allergier mot noen av materialene i Madglove Assist. (Se seksjon 6 for materialer. Dersom du er usikker, rådfør deg med helsepersonell.)

Brudd eller ufullstendig tilhelede skader: Ubehandlete brudd, åpne sår eller skader i hånd- eller håndleddsområdet som ikke er tilhelet. **Forkortede sener eller kontrakturer:** I slike tilfeller kan stabilisering av håndleddet øke fleksor-tonus i fingrene, noe som reduserer håndåpning og kan gi ubehag. Funksjonell elektrisk stimulering kan bidra til å redusere denne effekten. Rådfør deg med helsepersonell. **Dersom noe av dette gjelder deg, skal du IKKE bruke Madglove Assist og bør rådføre deg med helsepersonell.**

2.3. Forholdsregler (hva du må være oppmerksom på)

Riktig passform: Sørg for at Madglove Assist passer hånden din riktig. Feil passform kan føre til ubehag, redusert effekt eller skade. Juster stroppene og spenningssystemet. Se seksjon 5 for tilpassningsinstruksjoner.

Hudkontroll: Undersøk huden regelmessig for irritasjon, rødhet, hevelse eller allergiske reaksjoner. Vær spesielt oppmerksom på trykkpunkter under hansken og stroppene. Hvis det oppstår hudreaksjoner, slutt å bruke Madglove Assist og kontakt helsepersonell.

Trykkovertvåkning: Kontroller at det ikke oppstår for høyt trykk fra hansken eller skinnen (minst én gang per time). Juster stramhet og spenning for komfort. Ikke stram for mye.

Sensibilitet: Dersom du har redusert følelse i hendene, må du være ekstra forsiktig. Vær oppmerksom på tegn på ubehag, nummenhet, prikking eller endringer i hudfarge (blekhet eller blåfarging) under og etter bruk. Det anbefales å bruke produktet med tilstedeværelse av en omsorgsperson.

Begrenset mobilitet: Madglove Assist er et støttehjelpemiddel og erstatter ikke profesjonell fysioterapi eller annen medisinsk behandling. Det er et supplement for å støtte daglige aktiviteter.

Rengjøring: Rengjør alltid Madglove Assist og tilhørende komponenter korrekt. Se seksjon 6 for rengjøringsinstruksjoner.

Oppbevaring: Oppbevar produktet på et rent, kjølig og tørt sted for å unngå skade. Unngå ekstreme temperaturer og direkte sollys.

Regelmessig inspeksjon: Kontroller jevnlig for slitasje, skader eller feil. Dersom det oppdages skade, slutt å bruke produktet og kontakt Madglove.

Hvis du opplever ubehag eller uvanlige symptomer under bruk av Madglove Assist, skal du straks slutte å bruke det og rådføre deg med helsepersonell.

2.4. Bivirkninger (mulige problemer)

Selv om Madglove Assist er utviklet for å være trygg i bruk, kan det oppstå problemer. Disse er vanligvis knyttet til feil bruk, sensitivitet eller eksisterende tilstander. Avbryt bruken og kontakt helsepersonell dersom noe av følgende oppstår:

Hudirritasjon eller allergiske reaksjoner: Rødhet, kløe, utslett, hevelse eller blemmer der produktet er i kontakt med huden.

Nedsatt sirkulasjon: Nummenhet, prikking, kuldefølelse eller misfarging (blekhet eller blåfarging) i finger eller hånd.

Økt smerte eller ubehag: Betydelig økning i smerte eller ubehag.

Forverring av eksisterende tilstander: Dersom du har artritt eller perifer nevropati, kan Madglove Assist forverre symptomene dine.

Trykksår: Langvarig eller for høyt trykk kan føre til trykksår.

Kontroller huden regelmessig (minst én gang per time ved bruk).

Skade på produktet: Skadede komponenter kan øke risikoen for skade.

3. Kom i gang

3.1. Hva inneholder settet? Ditt Madglove Assist-sett inneholder alt du trenger:

Madglove Assist: Selve hansken, allerede utstyrt med mekanismedeksel.

Gjenbrukbar vaskepose: Bruk denne nettingposen for å beskytte hansken under rengjøring.

To sett fingerhylser: Ett sett er tykkere og mer stivt, og det andre er tynnere og mer elastisk. Velg settet som passer best til dine behov.

Riktig bruk: Velg riktig fingerhylsesett i henhold til dine behov. Se seksjon 3.2 for veiledning i oppsett av Madglove Assist.

Skyver og plugg: For spenningsystemet.

Brukermanual: Denne manualen.

Magnetisk oppbevaringseske: Brukes til lukking under transport, men kan også benyttes til oppbevaring etter bruk.

3.2 Valg av riktige fingerhylser

Madglove Assist leveres med to sett fingerhylser for å dekke ulike behov:

Tynnere, mer elastiske fingerhylser:

Bedre fingerfærdighet: Gir større bevegelsesfrihet for oppgaver som krever presisjon.

Økt komfort: Fleksible og mindre restriktive.

Økt taktil sensitivitet: Gir økt sensitivitet og bedre berøringssans.

Tykkere, mer stive fingerhylser:

Økt støtte og stabilitet: Hindrer uønskede bevegelser, egnet med mer spastiske fingre.


Bedre kontroll: Bidrar til bedre kontroll over fingerbevegelser, spesielt nyttig for personer med spastisitet eller redusert finmotorikk.

Du kan også kombinere ulike fingerhylser ved å bruke tynnere hylser på noen fingre og tykkere på andre. Prøv deg frem for å finne det

som fungerer best for deg. Utelat fingerhylser på fingre som ikke trenger støtte.

Følg alltid rådene fra helsepersonell.

Ikonene nedenfor finnes på fingertuppene og indikerer hvilken finger hylsen er beregnet for

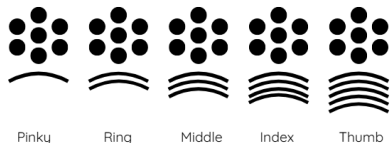


4. Bruk av Madglove Assist

For en mer detaljert forklaring, besøk nettsiden vår for videoinstruksjoner om hvordan du setter opp Madglove Assist.

4.1 Slik setter du opp

Forberedelse: Legg hansken flatt på en ren og tørr overflate med alle borrelåsstropper løsnet.

Håndleddstøtte: Plasser håndens bakside i den åpne fordypningen, og la knokene på hånden flukte med hansens øvre kant. Plasser lillefingersiden av hånden mot siden med tre elastiske bånd. Fest håndleddstøtten ved å feste borrelåsstroppene. Start med den grå fliken som har kontakt med huden først, deretter den parallelle fliken. Juster stramheten etter behov ved hjelp av de resterende borrelåsstroppene. Gjenta for begge stroppene.

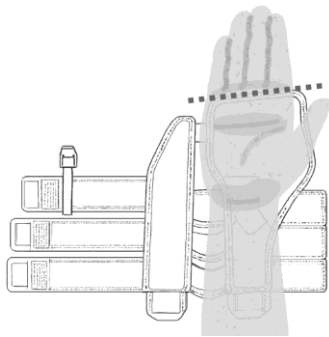

Fingerhylser: Sørg for at spenningshjulet er helt løsnet (uten spenning). Trekk forsiktig fingerhylsene over fingertuppene, slik at innsiden av fingrene er eksponert, og toppen av hver finger dekkes av hylsen.

Justering av fingerlengde: Ved første gangs bruk anbefales det å få hjelp. Finn snorene nederst på hver fingerhylse. Før disse snorene gjennom gliderne øverst på baksiden av hansken, og deretter gjennom de små hullene i sentralkomponenten.

For å sikre snorene, trykk dem inn i den tilhørende sporet øverst på sentralkomponenten. Sørg for å føre snoren til lillefingerhylsen på siden nærmest de tre båndene på siden av hansken. Pekefingeren skal være lengst unna disse tre forbindelsesbåndene.

For å justere lengden på hylsene, sørg for at sentralkomponenten er justert med den hvite markeringen på baksiden av hånden før du strammer snorene tilbake på plass. For korrekt spenn skal du kunne kjenne eller se et lett drag i fingrene når dette er riktig innstilt.

Trykk pluggen inn i sentralkomponenten for å låse snorene på plass. Bruk skyveren for å fjerne pluggen ved behov.

Se bildene nedenfor for veiledning.



Montering av deksel: Plasser dekslet over hansken, og sørg for at den sirkulære utskjæringen nederst er riktig justert over spenningshjulet, og at utskjæringene øverst på dekslet er justert med gliderne.

Klikk trykknappene på høyre og venstre side av dekslet på plass.

Merk bokstaven på dekslet som er justert med toppen av sentralkomponenten for å registrere gjeldende spenningsinnstilling for fremtidig referanse.

Dersom helsepersonell har anbefalt en spesifikk spenningsinnstilling, juster tilsvarende til den angitte bokstaven er riktig innstilt.



Påføring av spenning: Drei spenningshjulet for å påføre spenning.

Juster spenningen til ønsket nivå, men sørg for at det ikke forårsaker smerte, ubehag eller overekstensjon av fingrene. Regelmessig justering av spenningen kan være nødvendig under bruk.

For å frigjøre spenningen, fjern hele hansken umiddelbart. Dersom det er påført for høy spenning, drei hjulet i motsatt retning for å justere spenningen.

Fjerning: For å ta av hansken, løsne først spenningsmekanismen. Fjern deretter borrelåsstroppene rundt håndleddet (først strammestroppen, deretter lukke-stroppen, etterfulgt av borrelåsstroppene med grå fliker). Hansken kan deretter tas av.



4.2 Feilsøking

Problem: Hansken følges for stram

Løsning: Løsne borrelåsstroppene rundt händleddet og reduser spenninger med spenningshjulet.

Problem: Hansken sklir av

Løsning: Stram borrelåsstroppene rundt händleddet og juster mengden spenning med spenningshjulet.

Dersom du opplever vansker under oppsett eller har spørsmål, se illustrasjonene i denne manualen eller kontakt helsepersonell for veiledning.

5. Stell og rengjøring

Håndvask: Madglove Assist og tilhørende komponenter (fingerhylser, deksel osv.) kan punktvis rengjøres med mild såpe og lunkent vann. Gni forsiktig for å fjerne smuss og belegg. Unngå sterke kjemikalier, sliperende rengjøringsmidler og klorin, da dette kan skade materialene.

Tørring: La Madglove Assist lufttørke helt før oppbevaring. Ikke bruk tørketrommel eller andre varmekilder, da dette kan skade materialene.

6. Produktspesifikasjoner

Størrelser: Small, Medium, Large (for både høyre og venstre hånd)

Materialer i hanske:

60% Polyester 20% Neopren (**i direkte kontakt med huden**)

16% Polyetylen

2% Nylon

2% Latex (**i direkte kontakt med huden**)

Materialer i fingerhylser:

100% Polyester (tynne fingerhylser)

100% Neopren (tykke fingerhylser)

7. Garantiinformasjon

Madglove garanterer at Madglove Assist-enheten er fri for material- og produksjonsfeil i en periode på ett (1) år fra opprinnelig kjøpsdato. Garantien gjelder kun for opprinnelig kjøper og kan ikke overføres.

Hva garantien dekker:

Denne garantien dekker material- eller produksjonsfeil som gjør at Madglove Assist ikke fungerer i henhold til spesifikasjonene i denne manualen.

Hva garantien ikke dekker:

Garantien dekker ikke:

- Skader forårsaket av feil bruk, misbruk, ulykke eller feil håndtering
- Normal slitasje
- Skader forårsaket av uautoriserte reparasjoner eller modifikasjoner
- Skader forårsaket av feil rengjøring eller oppbevaring
- Kosmetiske skader som ikke påvirker funksjonaliteten til enheten

Slik fremmer du en garantisak:

For å fremme en garantisak, følg disse trinnene:

1. Kontakt Madglove kundesøtte via klageskjemaet på nettsiden vår. Dette vil veilede deg gjennom all nødvendig informasjon slik at vi kan løse problemet.
2. Pakk Madglove Assist-enheten forsvarlig, inkludert en kopi av originalt kjøpsbevis (kvittering eller faktura) og en detaljert beskrivelse av feilen.
3. Send pakken til adressen som oppgis av kundesøtte

Madglove vil, etter eget valg, reparere eller erstatte den defekte enheten med en ny eller en oppusset enhet med tilsvarende eller bedre funksjonalitet. Den reparerte eller erstattede enheten vil være dekket av garanti for resten av den opprinnelige garantiperioden.

Ansvarsbegrensning:

Madglove skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk eller manglende mulighet til å bruke Madglove Assist-enheten, selv om Madglove er blitt informert om muligheten for slike skader.

Dine rettigheter:

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.

8. Kontaktinformasjon

Madglove

Unit 1A-08, De Boelelaan 1095a, 1081 HV Amsterdam

Nettside: www.madglove.com

Email: info@madglove.com

Merk: Informasjonen i denne brukermanualen er kun ment som generell informasjon og utgjør ikke medisinsk rådgivning. Rådfør deg alltid med

helsepersonell ved spørsmål om helse eller før du tar beslutninger knyttet til behandling.