



**Produktkatalog
Västra Götalandsregionen
*2019-2020***

Hög värmeeffekt – Lång batterilivslängd

Förbehåll: Alla värden såsom värmeeffekt, vikt, storlek, livslängd etc. är vägledande och kan variera beroende på produkt och tillämpningsområde. Katalogen publiceras med förbehåll för skrivfel. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra katalogen till följd av ändrade säkerhetskrav, skrivfel och andra nödvändiga justeringar. Bilder på produkterna visas i vissa fall utan batteri och regulator.

Översikt

Innehåll	Sida
Vad är värmehjälpmedel?	4
Vilka egenskaper är viktiga för värmehjälpmedel?	4
Hur mycket värmeeffekt behöver jag?	5
Cypromed Active Liner	6
Cypromed Granberg Protex	7
Cypromed Gore-Tex Powder	8
Cypromed C-Zone Mitten	9
Cypromed Classic Mitten	10
Cypromed Leather Box	11
Cypromed Classic Glove	12
Cypromed Sport Classic	13
Cypromed C-Zone Mitten Jr.	14
Cypromed Merino Mitt*	15
Cypromed Merino Liner*	16
Cypromed Pro Arbetshandske*	17
Cypromed C-Zone Glove*	18
Cypromed Fjällvante*	19
Cypromed C-Zone Glove Jr*	20
Cypromed C-Zone Active*	21
Cypromed C-Zone Active Jr.*	22
Cypromed Baby Zip*	23
Cypromed Tillbehör/Reservdelar	24
Cypromed Specialanpassade produkter	25
Formulär	26

Om värmehjälpmedel

Vad är värmehjälpmedel?

Värmehjälpmedel är helt enkelt en handske, strumpa, sko eller annan produkt som har ett inbyggt värmeelement. Värmeelementet i produkten får elektricitet från ett batteri eller annan energikälla, och omvandlar den till värme. Denna extravärme kan hålla dig varm om du är känslig för kyla eller bara fryser mycket i kallt väder.

Värmen som tillförs i värmehjälpmedlet mäts ofta i nominell effekt. Värmeeffekten mäts i Watt, på samma sätt som ett element eller annan värmekälla i hemmet. Nominell effekt är värmeeffekten eller energin som produkten i genomsnitt ger dig under hela användningsperioden. Vi levererar en vuxenprodukt med 8–11 watts värmeeffekt, medan en barnprodukt normalt levereras med 2–5 watts värmeeffekt. Den värmeeffekt som hjälpmedlet levereras med varierar med produktens storlek. Vårt mål är att du alltid är varm och att batteriet varar så länge som möjligt.

Produkten levereras också med ett batteripaket. Batteripaketet innehåller en begränsad mängd energi. Batterikapaciteten anges i Wh. När du använder batteripaketet kommer det till sist att vara helt urladdat. När batteriet är urladdat är det bara att du laddar det igen innan du använder det nästa gång. Ju större batteripaket eller ju högre antal Wh din produkt har, desto längre användartid kan du förvänta dig. Från oss levereras en vuxenprodukt med ett 19,2 Wh-batteri, medan en barnprodukt kommer med ett 8,14 Wh-batteri. Med andra ord kan vårt största batteri på 19,2 Wh leverera 9,6 watt värmeeffekt i 2 timmar.

Vilka egenskaper anses vara viktiga för värmehjälpmedel?

- ✓ Tillräcklig värmeeffekt är värmehjälpmedlets viktigaste egenskap! Värmehjälpmedlet kämpar hela tiden mot elementen utanför produkten! Våra produkter levererar upp till 11 W värmeeffekt i de största storlekarna. Du som letar efter ett värmehjälpmedel gör det för att du vill hålla dig varm. Att värmehjälpmedlet har ett attraktivt utseende eller många funktioner hjälper inte stort om du fryser när du använder det!
- ✓ Batterier med hög kapacitet från en välrenommerad batteriproducent. När värmehjälpmedlet ger hög effekt är det viktigt att batterierna har kapacitet att leverera lika bra. Vårt största batteri kan leverera en värmeeffekt på 11 W i över 1,5 timme! Detta säkerställer att du inte bara är varm utan också att du håller dig varm under lång tid.
- ✓ Godkänt enligt MDD (EU:s medicintekniska direktiv). Detta säkerställer att produkten är säker att använda.




Hur mycket värmeeffekt behöver jag?

Att veta exakt hur mycket värmeeffekt du behöver kan vara svårt. De flesta uppfattar en ytemperatur på huden på över 20 °C som en bra nivå.

Din upplevelse av värmen i produkten kommer alltid att påverkas av ett antal faktorer:

- **Din hälsa och egenproduktion av värme**
- **Produktens isolering**
- **Utomhustemperatur**
- **Om produkten är våt eller torr och hur sliten den är**
- **Vind och luftfuktighet**
- **Värmetrådets placering och mönster i produkten**
- **Produktens storlek (hand-/fotstorlek)**
- **Din tolerans för vad som är en behaglig temperatur**
- **Produktens värmeeffekt**

En av de viktigaste funktionerna du ska kontrollera när det gäller värmehjälpmiddel är värmeeffekten. Vi fick Teknologisk Institutt i Norge att göra en oberoende jämförelse av en av våra produkter med en konkurrerande produkt¹. Innan testet gjordes framstod produkterna som så gott som identiska. Efter provet, som utfördes i ett kallrum vid -10 °C, visade produkterna signifikanta skillnader gällande hur bra de värmdes:

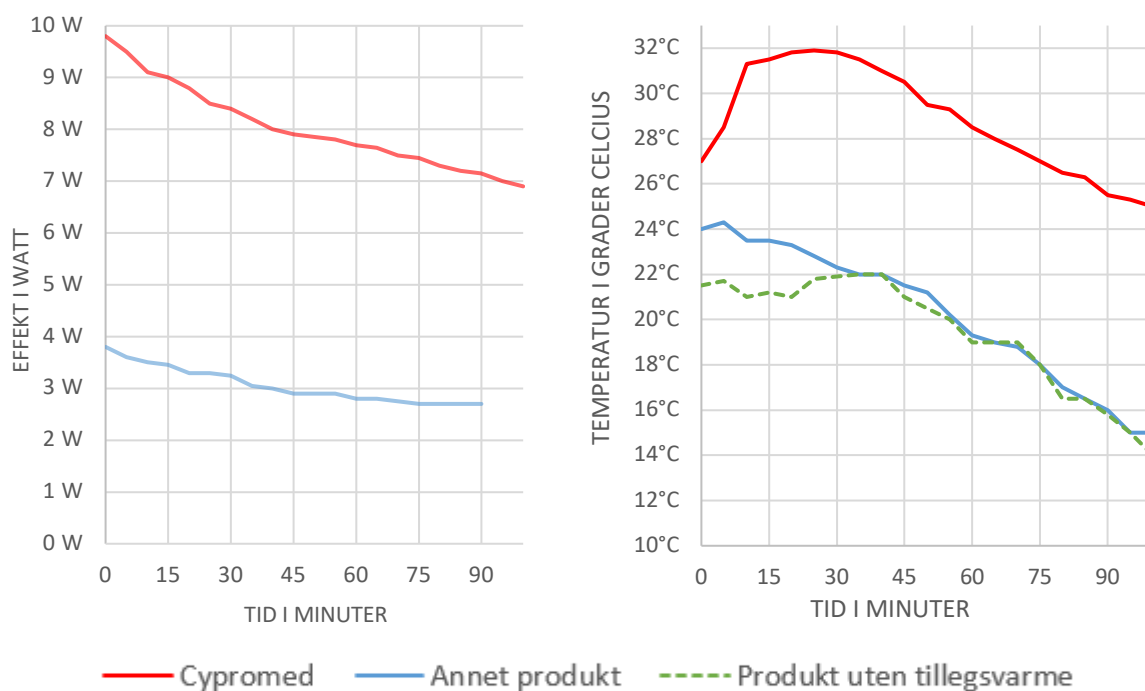

Under provet hade Cypromeds värmehjälpmiddel en nominell effekt på 7,9 W, medan den konkurrerande produkten endast producerade 3,6 W värme. Resultatet av dessa skillnader kan tydligt ses i diagrammet till höger. Den konkurrerande produkten värmdes knappt bättre än en produkt som var avstängd. Detta kan förklaras med att produktens värmeförlust blir större än den mängd energi som tillförs. Cypromeds produkt uppfattades å andra sidan som behagligt varm i 2 timmar av testpersonen, eftersom värmeeffekten i vårt värmehjälpmiddel var tillräckligt.

Testet som utfördes av Teknologisk Institutt visar hur viktigt det är med en tillräckligt hög värmeeffekt. Vårt bästa råd till dig är att du väljer det värmehjälpmiddel som har en tillräckligt bra värmeeffekt för att möta dina behov. Kontrollera alltid vilken värmeeffekt den produkt du överväger kan uppnå och att batteriet är tillräckligt stort för att hålla så länge som du behöver det. Våra produkter levererar alltid hög värmeeffekt över en lång tid, så det är inte konstigt att vi är utnämnda till "bäst i test"².

¹ Teknologisk Institutt rapport nummer 102350-000-023667 Rev.C

² Test utfört av Ergostart nr 1, 2008.

Cypromed Active Liner

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42/EEG, klass II B, IP-22
Värmeeffekt	Nominellt: 3,76 W till 11,1 W, beroende på handskens storlek.
Termostat	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på.
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett laddat paket.
Användningstid:	Alternativ A: Från minst 1,5 timmar upp till 2–4 timmar Alternativ B: Från minst 45 min upp till 1,5 timmar beroende på effektnivå/användning och temperatur.
Batteri:	Alternativ A: 5 200 mAh/19,2 Wh Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh
Beskrivning:	Unisex-modell. Tunn, fukttransporterande innerhandske med god andningsförmåga. Först och främst avsedd att användas i en bashandske på vintern, men kan även användas som en tunn handske, t.ex. vid löpning, fjällvandring och i mildt klimat.
Yttermaterial:	100 % polyester
Detaljer:	Tunn innerhandske/lätt användning.
Färg:	Mörkgrå
Isolering:	Tunt isolerad. Gjord för att användas i mildt klimat eller med annan handske över.
Artikelnummer:	Cy-V2R/34130-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare) ↳ <i>T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh)</i> ↳ <i>S = Storlek (3 till 11)</i>



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid Alt. A	Användningstid Alt. B	Leverantörens art.nr
3	4,11 W	>4 timmar	2 – 2,5 timmar	Cy-V2R/34130-3T-KIT
4	3,76 W	>4 timmar	2 – 2,5 timmar	Cy-V2R/34130-4T-KIT
5	3,76 W	>4 timmar	2 – 2,5 timmar	Cy-V2R/34130-5T-KIT
6	8,4 W	2 – 3 timmar	1 – 2 timmar	Cy-V2R/34130-6T-KIT
7	8,2 W	2 – 3 timmar	1 – 2 timmar	Cy-V2R/34130-7T-KIT
8	8,9 W	2 – 3 timmar	1 – 2 timmar	Cy-V2R/34130-8T-KIT
9	8,7 W	2 – 3 timmar	1 – 2 timmar	Cy-V2R/34130-9T-KIT
10	11,1 W	1,8 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/34130-10T-KIT
11	10,9 W	1,8 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/34130-11T-KIT

Cypromed Granberg Protex

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B
Värmeeffekt	Nominellt: 10,9 W till 11,14 W, beroende på handskens storlek.
Termostat	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på.
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket.
Användningstid:	Alternativ A: Från ca 1,5 timmar upp till 2–3 timmar Alternativ B: Från ca 45 min upp till 1,5 timmar beroende på effektnivå/användning och temperatur
Batteri:	Alternativ A: 5 200 mAh/19,2 Wh Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh
Beskrivning:	Arbetshandske i slitstarkt material. Vind- och vattentät.
Yttermaterial:	Övansida i vind- och vattentätt Protex-membran. PU Power Grip på insidan av handsken.
Detaljer:	Unisex-arbetshandske i slitstarkt material. Vind- och vattentät handske med ventilerande Protex membran (Gore-Tex). Handsken har en bra passform och ger ett bra grepp. Vibrationsdämpande material på insidan av handsken. Kan användas både inomhus och utomhus. Varmt och mjukt foder och reflex runt handleden.
Färg:	Svart med blå och gröna detaljer, som på bilden.
Förväntad värme:	God, men handskena är inte lika välisolerade som de andra produkterna i sortimentet eftersom produkten är avsedd att vara en arbetshandske.
Artikelnummer:	Cy-V2R/170-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare) → T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh) → S = Storlek (8 till 11)



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid Alt. A	Användningstid Alt. B	Leverantörens art.nr
8	7,99W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/170-8T-KIT
9	8,74 W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/170-9T-KIT
10	11,1W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/170-10T-KIT
11	10,9W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/170-11T-KIT

Cypromed Gore-Tex Powder

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B
Värmeeffekt	Nominellt: 7,99 W till 11,14 W, beroende på storlek
Termostat:	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket
Användningstid:	Alternativ A: Från ca 1,5 timmar upp till 3 timmar Alternativ B: Från ca 45 min upp till 1,5 timmar beroende på effektnivå/användning och temperatur
Batteri:	Alternativ A: 5 200 mAh/19,2 Wh Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh
Beskrivning:	Lång handske i slitstarkt material som passar bra i skidba
Yttermaterial:	Vattentätt och ventilerande membran i Gore-Tex. PU Power Grip på insidan av handsken
Detaljer:	Snöläs och åtstramning med kardborreband
Färg:	Svart
Förväntad värme:	Väldigt bra. En av de bäst isolerade produkterna i sortimentet
Artikelnummer:	Cy-V2R/31380-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare)

→ T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh)
→ S = Storlek (6 till 11)



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid Alt. A	Användningstid Alt. B	Leverantörens art.nr
6	8,39W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/31380-6T-KIT
7	8,19W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/31380-7T-KIT
8	7,99W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/31380-8T-KIT
9	8,74W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/31380-9T-KIT
10	11,14W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/31380-10T-KIT
11	10,90W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	CY-V2R/31380-11T-KIT

Cypromed C-Zone Mitten

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B
Värmeeffekt	Nominellt: 9,33 W till 11,64 W, beroende på handskens storlek.
Termostat:	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på.
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket.
Användningstid:	Alternativ A: Från ca 1,5 timmar upp till 2–3 timmar Alternativ B: Från ca 45 min upp till 1,5 timmar beroende på effektnivå/användning och temperatur
Batteri:	Alternativ A: 5 200 mAh/19,2 Wh Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh
Beskrivning:	Varm och slitstark vante med långa muddar
Yttermaterial:	Ovansida i vattentätt och ventilerande C-Zone membran. Impregnerat getskinn i handflatan
Detaljer:	Varm unisex-vante med snölås och åtstramning med kardborreband. Bekväm dragkedjeficka till batteri
Färg:	Svart med rött blyxtlås
Förväntad värme:	Väldigt bra. En av de bäst isolerade produkterna i sortimentet
Artikelnummer:	Cy-V1R31851-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare) → T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh) → S = Storlek (6 till 11)



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid Alt. A	Användningstid Alt. B	Leverantörens art.nr
6	9,33W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/31851-6T-KIT
7	9,07W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/31851-7T-KIT
8	9,59W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/31851-8T-KIT
9	9,36W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/31851-9T-KIT
10	11,64W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/31851-10T-KIT
11	11,14W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/31851-11T-KIT

Cypromed Classic Mitten

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B
Värmeeffekt	Nominellt: 9,07 W till 9,59 W, beroende på handskens storlek.
Termostat	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på.
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket.
Användningstid:	Alternativ A: Från ca 2 timmar upp till 2–3 timmar Alternativ B: Från ca 45 min upp till 1,5 timmar beroende på effektnivå/användning och temperatur.
Batteri:	Alternativ A: 5 200 mAh/19,2 Wh Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh
Beskrivning:	Klassisk, moderiktig damvante i härligt, mjukt lammskinn
Yttermaterial:	Lammnappa anilin
Detaljer:	Vantar som passar bra i skidbacken och för lite finare användning. Sköldmärke och dragkedjedetalj.
Färg:	Svart
Förväntad värme:	Väldigt bra. Välisolerad med primaloft
Artikelnummer:	Cy-V1R/30751-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare) ↳ <i>T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh)</i> ↳ <i>S = Storlek (6 till 9)</i>



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid Alt. A	Användningstid Alt. B	Leverantörens art.nr
6	9,33W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/30751-6T-KIT
7	9,07W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/30751-7T-KIT
8	9,59W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/30751-8T-KIT
9	9,36W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/30751-9T-KIT

Cypromed Leather Box

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B
Värmeeffekt	Nominellt: 9,36 W till 11,64 W, beroende på handskens storlek.
Termostat	3-stegs reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på.
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket.
Användningstid:	Alternativ A: Från ca 2 timmar upp till 2–3 timmar Alternativ B: Från ca 45 min upp till 1,5 timmar beroende på effektnivå/användning och temperatur
Batteri:	Alternativ A: 5 200 mAh/19,2 Wh Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh
Beskrivning:	Klassisk och traditionell skinnvante för herr
Yttermaterial:	Oxnappa
Detaljer:	Vante som passar bra i både skidbacken och vardagen. Uttagbart foder i polyester-pile.
Färg:	Svart
Förväntad värme:	Väldigt bra. Välisolerad
Artikelnummer:	Cy-V1R/35371-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare) → T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh) → S = Storlek (6 till 9)



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid Alt. A	Användningstid Alt. B	Leverantörens art.nr
6	9,33W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/35371-7T-KIT
7	9,07W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/35371-8T-KIT
8	9,59W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/35371-9T-KIT
9	9,36W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/35371-10T-KIT
11	10,9W	1,5 – 2 timmar	40 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/35371-11T-KIT

Cypromed Classic Glove

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B, IP-22
Värmeeffekt	Nominellt: 8 till 9 W, beroende på handskens storlek.
Termostat	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 37 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på.
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket.
Användningstid:	Alternativ A: Från minst 2 timmar upp till 3–4 timmar Alternativ B: Från minst 50 min upp till 2 timmar beroende på effektnivå/användning och temperatur.
Batteri:	Alternativ A: 5 200 mAh/19,2 Wh Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh
Beskrivning:	Klassisk, moderiktig damhandske i härligt, mjukt lammskinn. Passar både bra i skidbacken och till lite finare användning.
Yttermaterial:	Lammnappa anilin
Detaljer:	Dragkedja i metall och präglad skinn.
Färg:	Svart damhandske.
Förväntad värme:	Väldigt bra. Välisolerad med Primaloft.
Artikelnummer:	Cy-V2R/3280-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare) → T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh) → S = Storlek (6 till 9)



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid Alt. A	Användningstid Alt. B	Leverantörens art.nr
6	8,39W	2 – 4 timmar	50 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/3280-6T-KIT
7	7,51W	2 – 4 timmar	50 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/3280-7T-KIT
8	7,51W	2 – 4 timmar	50 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/3280-8T-KIT
9	9,07W	2 – 4 timmar	50 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/3280-9T-KIT

Cypromed Sport Classic

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B
Värmeeffekt	Nominellt: 7,51 W till 9,36 W, beroende på handskens storlek.
Termostat	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på.
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket.
Användningstid:	Alternativ A: Från minst 2 timmar upp till 3–4 timmar Alternativ B: Från minst 50 min upp till 2 timmar beroende på effektnivå/användning och temperatur.
Batteri:	Alternativ A: 5 200 mAh/19,2 Wh Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh
Beskrivning:	Formsydd, mjuk herrhandske i skandinaviskt älgskinn. Fodrat med härlig, varmt microfleece. Kort mudd.
Yttermaterial:	Skandinaviskt älgskinn
Detaljer:	Halvpiqué, tre sömmar på ovansidan, rem med tryckknapp.
Färg:	Mörkbrunt skinn
Förväntad värme:	Utmärkt värme, handsken har microfleece och fiberfill.
Artikelnummer:	Cy-V2R/2087-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare) → T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh) → S = Storlek (8 till 11)



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid Alt. A	Användningstid Alt. B	Leverantörens art.nr
8	7,51W	2 – 4 timmar	50 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/2087-8T-KIT
9	9,07W	2 – 3 timmar	40 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/2087-9T-KIT
10	8,61 W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/2087-10T-KIT
11	9,36W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/2087-11T-KIT

Cypromed C-Zone Mitten Jr

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B
Värmeeffekt	Nominellt: 3,60 W till 5,16 W, beroende på storlek
Termostat	3-stegs reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket
Användningstid:	Från minst 1,5 timmar upp till 3–4 timmar
Batteri:	2 200 mAh/7,9 Wh – Alt. B (Stort batteri på 5 200 mAh/19,2 Wh rekommenderas inte)
Beskrivning:	En varm och populär juniorvante i C-Zone membran som är vattentät och andas
Yttermaterial:	Ovansida i vind- och vattentätt HESTRA Proton. PU Power Grip på insidan av handsken
Detaljer:	Snöläs och åtstramning med kardborreband
Färg:	Svart
Förväntad värme:	Väldigt bra. En av de bäst isolerade produkterna i sortimentet
Artikelnummer:	Cy-B2R/32531-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare) → T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh) → S = Storlek (3 till 7)



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid	Leverantörens art.nr
3	3,93 W	1,5 – 4 timmar	Cy-B1R/32531-3B-KIT
4	3,60W	1,5 – 4 timmar	Cy-B1R/32531-4B-KIT
5	4,98W	1,5 – 4 timmar	Cy-B1R/32531-5B-KIT
6	4,63 W	1,5 – 4 timmar	Cy-B1R/32531-6B-KIT
7	5,16 W	1,5 – 3 timmar	CY-V2R/3187-7B-KIT

Cypromed Merino Mitt*

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B, IP-22
Värmeeffekt	Nominellt: 3,60 W till 11,64 W, beroende på storlek.
Termostat:	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på.
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett laddat paket.
Användningstid:	Alternativ A: Från minst 1,5 timmar upp till 2–4 timmar Alternativ B: Från minst 45 min upp till 1,5 timmar beroende på effektnivå/användning och temperatur.
Batteri:	Alternativ A: 5 200 mAh/19,2 Wh Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh
Beskrivning:	Unisex-modell. Mjuk innervante som ger ett extra varmt lager i kallt väder. Passar inuti de flesta vantar. Kombinationen av merinoull, polyamid och elastan gör vanten både varm och slitstark
Yttermaterial:	65 % merinoull, 28 % polyamid, 7 % elastan
Detaljer:	Tunn innervante/lätt att använda.
Färg:	Mörkgrå
Isolering:	Tunt isolerad. Menad för användning i mildt klimat eller med annan vante över.
Artikelnummer:	Cy-V1R/34311-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare) ↳ <i>T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh)</i> ↳ <i>S = Storlek (3 till 11)</i>



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid Alt. A	Användningstid Alt. B	Leverantörens art.nr
3	3,93 W	>4 timmar	2 – 2,5 timmar	Cy-V1R/34311-3T-KIT
4	3,60 W	>4 timmar	2,2 – 3,0 timmar	Cy-V1R/34311-4T-KIT
5	4,98W	>4 timmar	1,5 – 2 timmar	Cy-V1R/34311-5T-KIT
6	9,33W	2 – 3 timmar	2 – 3 timmar	Cy-V1R/34311-6T-KIT
7	9,07W	2 – 3 timmar	2 – 3 timmar	Cy-V1R/34311-7T-KIT
8	9,59W	2 – 3 timmar	2 – 3 timmar	Cy-V1R/34311-8T-KIT
9	9,36W	2 – 3 timmar	2 – 3 timmar	Cy-V1R/34311-9T-KIT
10	11,64W	1,8 – 3 timmar	1,5 – 2 timmar	Cy-V1R/34311-10T-KIT
11	11,14W	1,8 – 3 timmar	1,5 – 2 timmar	Cy-V1R/34311-11T-KIT

* Produkten tillhör Övriga produkter

15

Cypromed Merino Liner*

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B, IP-22
Värmeeffekt	Nominellt: 3,76 W till 11,1 W, beroende på handskens storlek.
Termostat	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på.
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett laddat paket.
Användningstid:	Alternativ A: Från minst 1,5 timmar upp till 2–4 timmar Alternativ B: Från minst 45 min upp till 1,5 timmar beroende på effektnivå/användning och temperatur.
Batteri:	Alternativ A: 5 200 mAh/19,2 Wh Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh
Beskrivning:	Unisex-modell. Mjuk och tunn innerhandske som ger ett extra varmt lager i kallt väder. Kan användas inuti de flesta handskar. Kombinationen av merinoull och nylon gör handsken både varm och slitstark.
Yttermaterial:	70 % merinoull, 30 % polyamid
Detaljer:	Tunn innerhandske/lätt att använda
Färg:	Mörkgrå
Isolering:	Tunt isolerad. Menad för användning i mildt klimat eller med annan handske över.
Artikelnummer:	Cy-V2R/34110-ST

→ T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh)
→ S = Storlek (3 till 11)



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid Alt. A	Användningstid Alt. B	Leverantörens art.nr
3	4,11 W	>4 timmar	2 – 2,5 timmar	Cy-V2R/34110-3T-KIT
4	3,76 W	>4 timmar	2 – 2,5 timmar	Cy-V2R/34110-4T-KIT
5	3,76 W	>4 timmar	2 – 2,5 timmar	Cy-V2R/34110-5T-KIT
6	8,4 W	2 – 3 timmar	1 – 2 timmar	Cy-V2R/34110-6T-KIT
7	8,2 W	2 – 3 timmar	1 – 2 timmar	Cy-V2R/34110-7T-KIT
8	8,9 W	2 – 3 timmar	1 – 2 timmar	Cy-V2R/34110-8T-KIT
9	8,7 W	2 – 3 timmar	1 – 2 timmar	Cy-V2R/34110-9T-KIT
10	11,1 W	1,8 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/34110-10T-KIT
11	10,9 W	1,8 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/34110-11T-KIT

Cypromed Pro Arbetshandske*

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B
Värmeeffekt	Nominellt: 10,9 W till 11,14 W, beroende på handskens storlek.
Termostat	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på.
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket.
Användningstid:	Alternativ A: Från ca 1,5 timmar upp till 2–3 timmar Alternativ B: Från ca 45 min upp till 1,5 timmar beroende på effektnivå/användning och temperatur
Batteri:	Alternativ A: 5 200 mAh/19,2 Wh Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh
Beskrivning:	Arbetshandske i slitstarkt material.
Yttermaterial:	Microthan i handflatan, ett extremt smidigt och slitstarkt material
Detaljer:	Unisex-arbetshandske i slitstarkt material. Passar till monteringsarbete och annat arbete som ställer höga krav på passform och fingertoppskänsl
Färg:	Svart med blå och gröna detaljer, som på bilden.
Förväntad värme:	God, men handskarna är inte lika välisolerade som de andra produkterna i sortimentet eftersom produkten är avsedd att vara en arbetshandske.
Artikelnummer:	Cy-V2R/9112-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare) ↳ T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh) ↳ S = Storlek (9 till 11)



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid Alt. A	Användningstid Alt. B	Leverantörens art.nr
9	8,74 W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/9112-9T-KIT
10	11,1W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/9112-10T-KIT
11	10,9W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/9112-11T-KIT

Cypromed C-Zone Glove*

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B
Värmeeffekt	Nominellt: 10,9 W till 11,14 W, beroende på handskens storlek.
Termostat:	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på.
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket.
Användningstid:	Alternativ A: Från ca 1,5 timmar upp till 3 timmar Alternativ B: Från ca 45 min upp till 1,5 timmar beroende på effektnivå/användning och temperatur
Batteri:	Alternativ A: 5 200 mAh/19,2 Wh Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh
Beskrivning:	Varm och slitstark handske med långa muddar
Yttermaterial:	Ovansida i C-Zone membran som är vattentätt och andas. Impregnerat getskinn i handflatan
Detaljer:	Varm unisex-handske med förstärkta fingertoppar. Snöläs och åtstramning med kardborreband. Bekväm dragkedjeficka till batteri
Färg:	Svart med rött blixtlås
Förväntad värme:	Väldigt bra. En av de bästa isolerade produkterna i sortimentet
Artikelnummer:	Cy-V2R/31850-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare) → T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh) → S = Storlek (6 till 11)



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid Alt. A	Användningstid Alt. B	Leverantörens art.nr
6	8,39W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/31850-6T-KIT
7	8,19W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/31850-7T-KIT
8	7,99W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/31850-8T-KIT
9	11,4 W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/31850-9T-KIT
10	11,1 W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/31850-10T-KIT
11	10,9 W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/31850-11T-KIT

Cypromed Fjällvante*

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B
Värmeeffekt	Nominellt: 9,07W till 11,64W, beroende på storlek
Termostat	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket
Användningstid:	Alternativ A: Från ca 2 timmar upp till 2–3 timmar Alternativ B: Från ca 45 min upp till 1,5 timmar beroende på effektnivå/användning och temperatur
Batteri:	Alternativ A: 5 200 mAh/19,2 Wh Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh
Beskrivning:	Skalvante i slitstarkt material för allround-användning. Avtagbar innervante i ullpile och ullfrotté. Vanten kan kombineras med en innervante eller annat foder.
Yttermaterial:	Ovansida i vind- och vattentätt material. HESTRA Triton tre lager polyamid som andas. Nor Grip på handskens insida
Detaljer:	Snöläs och åtstramning med kardborreband
Färg:	Svart
Förväntad värme:	Väldigt bra. Ett av de bäst isolerade produkterna i sortimentet
Artikelnummer:	Cy-V1R/35901-ST → <i>T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh)</i> → <i>S = Storlek (6 till 11)</i>



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid Alt. A	Användningstid Alt. B	Leverantörens art.nr
6	9,33W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/35901-6 (T)
7	9,07W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/35901-7 (T)
8	9,59W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/35901-8 (T)
9	9,36W	2 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/35901-9 (T)
10	11,64W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V1R/35901-10 (T)
11	11,14W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	CY-V1R/35901-11 (T)

* Produkten tillhör Övriga produkter

19

Cypromed C-Zone Glove Jr.*

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B
Värmeeffekt	Nominellt: 3,76 W till 4,99 W, beroende på handskens storlek.
Termostat:	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på.
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket.
Användningstid:	Från minst 1,5/2 timmar upp till 4 timmar beroende på effektnivå/användning.
Batteri:	2 200 mAh/7,9 Wh (Stort batteri på 5 200 mAh/19,2 Wh rekommenderas inte)
Beskrivning:	Varml och populär juniorhandske för barn. Förstärkta fingertoppar. Vattentätt och ventilerande material



Yttermaterial: Ovansida i vind- och vattentätt HESTRA Proton.
PU Power Grip på insidan av handsken

Detaljer: Snöläs och åtstramning med kardborreband

Färg: Svart

Artikelnummer: **Cy-B2R/32530-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare)**
 ↳ *T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh)*
 ↳ *S = Storlek (3 – 7)*

Storlek	Värmeeffekt	Användningstid	Leverantörens art.nr
3	4,11W	2 – 4 timmar	Cy-B2R/32530-3B-KIT
4	3,76W	2 – 4 timmar	Cy-B2R/32530-4B-KIT
5	3,76W	2 – 4 timmar	Cy-V2R/32530-5B-KIT
6	4,32W	1,5 – 4 timmar	Cy-V2R/32530-6B-KIT
7	4,99W	1,5 – 4 timmar	Cy-V2R/32530-7B-KIT

Cypromed C-Zone Active*

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B
Värmeeffekt	Nominellt: 7,99 W till 11,14 W, beroende på storlek
Termostat	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C. beroende på vilket steg termostaten är inställd på
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket
Användningstid:	Alternativ A: Från ca 1,5 timmar upp till 3 timmar Alternativ B: Från ca 45 min upp till 1,5 timmar beroende på effektnivå/användning och temperatur
Batteri:	Alternativ A: 5 200 mAh/19,2 Wh Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh
Beskrivning:	En extremt smidig handske med många användningsområden stretchmaterial
Yttermaterial:	Vattentätt, vindtätt och ventilerande Hestra Flextron softshell-material på handskens ovansida. C-Zone membran. PU Power Grip på insidan av handsken
Detaljer:	Snöläs och åtstramning med kardborreband
Färg:	Svart
Artikelnummer:	Cy-V2R/32290-ST

→ T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh)
→ S = Storlek (6 till 11)



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid Alt. A	Användningstid Alt. B	Leverantörens art.nr
6	8,39W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/32290-6 (T)
7	8,19W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/32290-7 (T)
8	7,99W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/32290-8 (T)
9	8,74W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/32290-9 (T)
10	11,14W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	Cy-V2R/32290-10 (T)
11	10,90W	1,5 – 3 timmar	45 min – 1,5 timmar	CY-V2R/32290-11 (T)

Cypromed C-Zone Active Jr.*

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B
Värmeeffekt	Nominellt: 3,76 W till 4,99 W, beroende på handskens storlek.
Termostat	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på.
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket.
Användningstid:	Från minst 1,5 timmar upp till 3–4 timmar

Batteri:	2 200 mAh/7,9 Wh (Stort batteri på 5 200 mAh/19,2 Wh rekommenderas inte)
-----------------	---

Beskrivning:	Tunn och smidig handske i elastiskt softshell-material med ett brett användningsområde för barn. Vattentätt och ventilerande C-Zone membran.
---------------------	---

Yttermaterial:	Ovansida i vindtätt, vattentätt och ventilerande Flextron softshell-tyg. PU Digital på insidan av handsken.
-----------------------	---

Detaljer:	Kardborreband. 3M Scotchlite-reflex
------------------	-------------------------------------

Färg:	Svart med grön eller rosa logotyp/detaljer
--------------	--

Artikelnummer:	Cy-B2R/32020-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare) ↳ <i>T = Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh)</i> ↳ <i>S = Storlek (2 till 7)</i>
-----------------------	--



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid	Leverantörens art.nr
2	≤4 W	2 – 4 timmar	Cy-B2R/32020-2B-KIT
3	4,11W	2 – 4 timmar	Cy-B2R/32020-3B-KIT
4	3,76W	2 – 4 timmar	Cy-B2R/32020-4B-KIT
5	3,76W	2 – 4 timmar	Cy-B2R/32020-5B-KIT
6	4,32W	2 – 3 timmar	Cy-B2R/32020-6B-KIT
7	4,99W	1,5 – 3 timmar	Cy-B2R/32020-7B-KIT

Cypromed Baby Zip*

Specifikationer:

Riskklass:	Medical Devices Directive 93/42 / EEG, klass II B
Värmeeffekt	Nominellt: 3,81 W till 3,93 W, beroende på handskens storlek.
Termostat:	3-steps reglerbar termostat Termostaten strävar efter att alltid hålla 33 °C, 35 °C eller 42 °C, beroende på vilket steg termostaten är inställd på.
Batterivakt:	Ljusindikatorn visar när batteriet måste laddas eller bytas ut mot ett nyladdat paket.
Användningstid:	Från minst 2 timmar upp till 3–4 timmar
Batteri:	Alternativ B: 2 200 mAh/7,9 Wh (Stort batteri på 5 200 mAh/19,2 Wh rekommenderas inte)
Beskrivning:	Mjuk och varm vante för de minsta som är enkel att få på och av eftersom den har en dragkedja i sidan. Slitstarkt material.
Yttermaterial:	Ovansida i vind- och vattentätt HESTRA Proton. PU Power Grip på insidan av handsken
Detaljer:	Reflexlogo, dragkedja i sidan, dragsko och kardborreband
Färg:	Rosa, Blå
Artikelnummer:	Cy-B1R/36421-ST-KIT (KIT=handske+batteri+laddare) → $T = \text{Batteri alternativ/typ (A=5 200 mAh/B=2 200 mAh)}$ → $S = \text{Storlek (antal år)}$



Storlek	Värmeeffekt	Användningstid	Leverantörens art.nr
1	3,81 W	2 – 4 timmar	Cy-B1R/36421-1B-KIT
2	3,86W	2 – 4 timmar	Cy-B1R/36421-2B-KIT
3	3,93 W	2 – 4 timmar	Cy-B1R/36421-3B-KIT
4	3,60W	2 – 4 timmar	Cy-B1R/36421-4B-KIT
5	4,98W	1,5 – 4 timmar	Cy-B1R/36421-5B-KIT

Cypromed Tillbehör/Reservdelar

Beskrivning:	Passar bäst till	Leverantörens art.nr
12 V billaddare för värmebatteri	Batteriladdare för användning i bil	Cy-12/24V
Batteri, stort, 5 500 mAh/19,2 Wh 100 mm kabellängd (handskar)	Värmehjälpmedel för vuxna	1S1751AB-32/100
Batteri, stort, 5 500 mAh/19,2 Wh 320 mm kabellängd (sockor och liknande)	Värmehjälpmedel för vuxna som behöver längre kabel	1S1751AB-32/320
Batteri, litet, 2 200 mAh/8,14 Wh 100 mm kabellängd (handskar)	Värmehjälpmedel för barn	1IMP133450/100
Batteri, litet, 2 200 mAh/8,14 Wh 200 mm kabellängd (sockor och liknande)	Värmehjälpmedel för barn som behöver längre kabel	1IMP133450/200
2-kanals batteriladdare	Laddar i par	Cy-GT2K
1-kanals batteriladdare	Laddare till en produkt	CY-2241

Vi rekommenderar ett batteri på 5 500 mAh i våra vuxenprodukter (vikt ca 90 gram). Då är du garanterad ordentlig värme under lång tid. Om du ändå vill ha mindre batterier till en av våra produkter kan vi också leverera 2 200 mAh-batteri (vikt ca 45 gram). Batterilivslängden blir lite kortare för det mindre batteriet eftersom våra vuxenprodukter producerar hög effekt och behöver batterikapacitet för att leverera ordentligt med värme under en längre tid.

Cypromed Specialanpassade produkter

Cypromed kan också leverera specialanpassade produkter. Dessa produkter kan anpassas till amputationer och liknande. Vi kan också anpassa värmen i andra produkter som t.ex. tröjor, överdragsstövlar och liknande. Vi kan producera anpassade produkter som antingen baseras på ritningar med mått eller avgjutningar.




Vänligen kontakta oss för mer information om specialanpassade produkter.

Skicka gärna ett mejl till oss på service@cypromed.no, eller ring oss om du undrar över något och vill veta mer!

Formulär

- Mät längden runt din hand över knogarna med ett måttband såsom bilden visar i ③.
- Mät runt din högra hand om du är högerhänt eller runt din vänstra om du är vänsterhänt.
- Se information om andra mått i måttdiagrammet nedan.
- Om du behöver ytterligare hjälp med att hitta rätt storlek, vänligen kontakta oss och ge mål ①, ② och ③

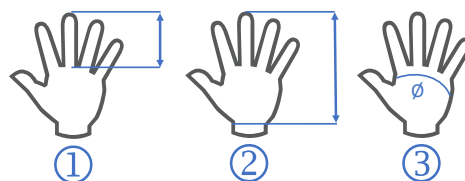

Storlek Dam		
	In	cm
	6	15
	(6 ½)	17
	7	18
	(7 ½)	19
	8	20

Storlek Män		
	In	cm
	7	18
	8	20
	9	23
	10	25
	11	30

Barnstorlek			
Baby/barn		Junior	
Str	År	Str	År
1	1-2	3	4-5
2	2-3	4	6-7
3	3-4	5	8-9
4	4-5	6	10-11
5	5-6	7	12-13
6	6-7		



Halva storlekar är endast tillgängliga för vissa modeller.

Tillbehör:

Antal:

(2 batteri och 1 laddare ingår redan i art.nr med "kit")

	Cy-12/24V – 12v billaddare
	1S1751AB-32/100 - Batteri, stort, 5 500 mAh/19,2 Wh, 100 mm kabellängd
	1S1751AB-32/320 - Batteri, stort, 5 500 mAh/19,2 Wh, 320 mm kabellängd
	1IMP133450/100 - Batteri, litet, 2 200 mAh/8,14 Wh, 100 mm kabellängd
	1IMP133450/200 - Batteri, litet, 2 200 mAh/8,14 Wh, 200 mm kabellängd
	Cy-GT2K - 2-kanals batteriladdare
	Cy-2241 - 1-kanals batteriladdare (specialanpassade produkter)

Beställningsnummer: _____

(Färg:) _____

Artikelnummer och
antal enheter _____

Beställer:

Namn _____

e-post: _____

Telefon: _____

908.300.004D
2019-10-29

Förbehåll: Alla värden såsom värmeeffekt, vikt, storlek, livslängd etc. är vägledande och kan variera beroende på produkt och tillämpningsområde. Katalogen publiceras med förbehåll för skrivfel. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra katalogen till följd av ändrade säkerhetskrav, skrivfel och andra nödvändiga justeringar. Bilder på produkten visas i vissa fall utan batteri och regulator.